

FX205

Короче и легче для непревзойденного баланса

Пневмомотор FX205 приблизительно на 25% короче и на 30% легче, чем предыдущие модели пневмомоторов. Миниатюрный размер, тем не менее, не мешает мотору обладать мощным крутящим моментом. В соединении с наконечником мотор FX205 обеспечивает улучшенный эргономичный баланс, что повышает комфорт и точность манипуляций во время клинических процедур.




Более компактный размер и легкий вес для превосходного баланса

Стойкость к многократным обработкам в автоклаве

FX205 с легкостью выдерживает многократное автоклавирование при температуре до 135°C.

135°C
SSS

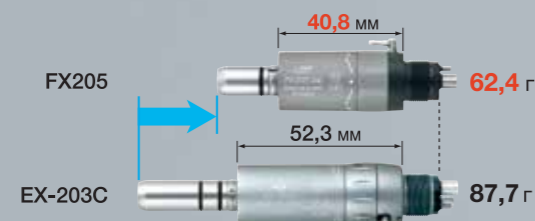

Пневмомотор FX205 • Внешняя подача водяного спрея • Макс. скорость 25 000 об/мин



МОДЕЛЬ FX205 M4 КОД ЗАКАЗА M1005002

• 4-канальный разъем Midwest

МОДЕЛЬ FX205 B2 КОД ЗАКАЗА M1006002

• 2-канальный разъем Borden

Комплект с пневмомотором FX205



МОДЕЛЬ FX205 M4 Set КОД ЗАКАЗА Y1002667

• 4-канальный разъем Midwest

МОДЕЛЬ FX205 B2 Set КОД ЗАКАЗА Y1002668

• 2-канальный разъем Borden

Комплектация

• Пневмомотор (FX205) • Прямой наконечник (FX65)
• Угловой наконечник (FX25)

Запчасти

| МОДЕЛЬ | ИЗДЕЛИЕ | КОД ЗАКАЗА | МОДЕЛЬ | ИЗДЕЛИЕ | КОД ЗАКАЗА | МОДЕЛЬ | ИЗДЕЛИЕ | КОД ЗАКАЗА |
|---------|------------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|------------|
| FX25-04 | Крышка головки для FX25/FX23 | C1052500 | FX Spray nozzle | для FX25-FX23/FX15 | C1052702 | Tube (RSM) | | Z166101 |
| FX25-03 | Картридж для FX25 | C1052700 | Spray nozzle | для FX65 | H019711 | | | |
| FX23-03 | Картридж для FX23 | C1056700 | FX Wrench | для FX25/FX23 | C1052701 | | | |

135°C
151 Автоклавирование при температуре до 135°C

NAKANISHI INC. **NSK Rus & CIS**
www.nsk-inc.com www.nsk-russia.ru
700 Shimohinata 115114, Россия, Москва
Kanuma-shi Дербеневская наб., 7,
Tochigi 322-8666, стр.16, 3-й этаж,
Japan
TEL: +81 (0)289-64-3380 Тел.: +7 (495) 967-96-07
FAX: +81 (0)289-62-5636 Факс: +7 (495) 967-96-08

Спецификация может быть изменена без уведомления.

PR-D803R 15.05.02 CP

NSK



FX series

Классические наконечники экономического класса

Упрощенная технология: Качество, Производительность, Низкая стоимость обслуживания



Powerful Partners®

FX series



Неразборные наконечники: Эргономичность, Функциональность, Надёжность

После 35 лет выдающегося мирового успеха классическая серия наконечников EX перешла на новую ступень развития и воплотилась в серию наконечников FX – модернизированную версию серии EX. Новая серия сохранила такие традиционные характеристики наконечников NSK, как простой эргономичный дизайн, функциональная надёжность, долговечность, ценовая доступность, но в то же время обладает новыми преимуществами в соответствии с современными требованиями: неразборная конструкция корпуса.



Улучшенный обзор: идеальный баланс

Очень компактная головка и эргономичный дизайн корпуса значительно улучшают прямой и непрямой обзор операционного поля, что также способствует лучшей видимости даже труднодоступных мест ротовой полости. Компактный и легкий корпус обеспечивает комфортный баланс, особенно при использовании с пневматическими моторами серии FX.

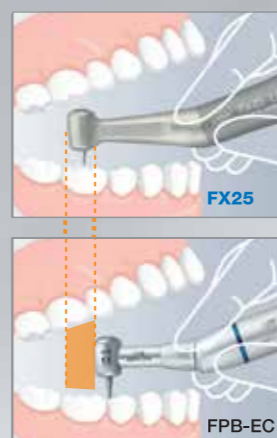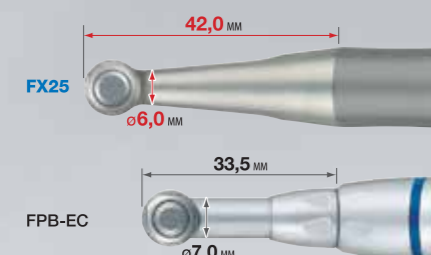

Максимально удобный доступ

Простая замена картриджа

Картридж можно легко заменить в течение нескольких мгновений собственными силами в условиях операционной при помощи поставляемых в комплекте инструментов, что позволяет снизить издержки и сократить время простоя оборудования. (FX25 / FX23)




Кнопочная цапга

Оригинальный кнопочный зажим NSK позволяет одним простым нажатием на кнопку заменить бор.




Высокоточный передаточный механизм

Технология ЧПУ типа «CNC» позволяет NSK производить детали передаточного механизма по высокоточной технологии, что обеспечивает плавную и точную работу практически без вибрации и с высокой надежностью.

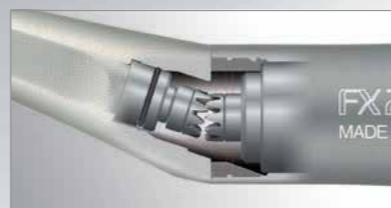

Система защиты от пыли

В конструкции наконечников FX25/FX15 компания NSK использовала специальный лабиринтный механизм, который называется «Система защиты от пыли». Он предотвращает попадание ротовой жидкости и других загрязнений в головку наконечника, тем самым продлевая срок службы подшипников (FX25 / FX15).

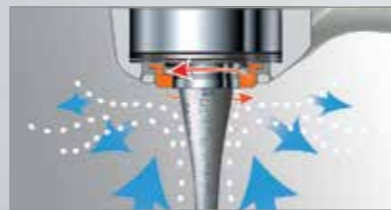


Гигиена

Бесшовный неразборный корпус способствует быстрой и простой очистке, обеспечивая высокий уровень гигиенической обработки.



FX57 система защиты от пасты

Головка профилактического наконечника FX57 оснащена уникальным механизмом NSK, известным как «Система защиты от пасты» (Paste Defense System). Эта система предотвращает попадание загрязнений внутрь наконечника, а использование покрытия DLC (алмазоподобное карбоновое покрытие) для механизмов картриджа защищает его от поломок, связанных с абразивным износом поверхности, вызываемым пастами для полировки. Это лишь одни из характеристик серии FX, продлевающих срок службы наконечника.

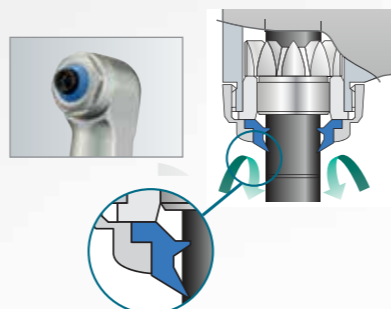

Модельный ряд угловых наконечников FX

Наконечники общего назначения

1 : 1 Прямая передача



модель **FX25** код заказа **C1052002**
 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Кнопочная цапга
 • Механизм защиты от пыли • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин

Наконечники для эндодонтии

16 : 1 Понижение



модель **FX75** код заказа **C1055002**
 • Миниатюрная головка • Для машинных файлов
 • Вращение на 360° • Кнопочная цапга
 • Макс. скорость: 1 250 об/мин

1 : 1 Прямая передача



модель **FX23** код заказа **C1056002**
 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Кнопочная цапга
 • Макс. скорость: 30 000 об/мин

Наконечник для профилактики

4 : 1 Понижение



модель **FX57** код заказа **C1054002**
 • Для колпачков и щеточек с резьбой • Вращение на 360°
 • Система защиты от пасты • Без подачи спрея
 • Макс. скорость: 5 000 об/мин

4 : 1 Понижение



модель **FX15** код заказа **C1053002**
 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Кнопочная цапга
 • Механизм защиты от пыли • Шариковые подшипники
 • Макс. скорость: 10 000 об/мин

Прямой наконечник

1 : 1 Прямая передача



модель **FX65** код заказа **H1014002**
 • Для НР боров (ø2,35 мм)
 • Макс. скорость: 40 000 об/мин